

QUICKVUE[®]

In-Line[®]

Strep A^{TEST}

QuickVue In-Line[®] Strep A • 25 Test Kit • Katalog #00343 CE

Diagnose und Behandlung in einem Tag!

Die Streptokokken-Pharyngitis kommt in allen Altersgruppen vor, besonders häufig tritt sie im Alter zwischen 5 und 15 Jahren auf. Die Diagnose erfolgt basierend auf Symptomen, der Patientenuntersuchung und den Ergebnissen aus Kulturansätzen.

Der QuickVue In-Line-StrepA ist ein echter 1-Schritt Test, der eine schnelle Erkennung von Streptokokken Antigenen der Gruppe A direkt vom Abstrichtupfer erlaubt.



Die einzigartige "In-Line Extraktion" erfolgt auf der Testkassette; das extrahierte Probenmaterial diffundiert direkt in den Testbereich und die zweifarbige Ergebnisanzeige garantiert einfachstes Ablesen der Resultate. Die sehr einfache Handhabung und das schnelle Vorliegen der Ergebnisse erlaubt die StrepA Bestimmung direkt am Patienten.

Schnelle Diagnose und Behandlung

- Ergebnisse innerhalb von 5 Minuten
- Diagnose und Behandlung bei den meisten Patienten in einem Arztbesuch

Hervorragende Testeigenschaften*

- 92%-ige Sensitivität
- 99%-ige Spezifität
- 96%-ige Übereinstimmung zur SBA Kultur

Einfache Durchführung

- 1-Schritt Test durch In-Line Extraktion auf Testkassette
- 1 Reagenz zur Extraktion; minimiert Möglichkeit von Anwendungsfehlern
- 2-farbige Ergebnisanzeige

Anwenderfreundlich

- Komplettes Testbesteck in jeder Packung enthalten, inklusive Abstrichtupfer
- Lagerung bei Raumtemperatur (14 Monate ab Produktion haltbar)
- Positive und negative Testkontrolle zur Bestätigung des korrekten Testablaufs
- Externe positive und negative Kontrollen in jeder Testpackung enthalten
- Individuelle Testsets ermöglichen die Einzelanwendung und damit die Aufteilung der Testpackung

*Interne Studien, durchgeführt bei Quidel Corporation. Für weitere Testeigenschaften, lesen Sie die Packungsbeilage.

QUIDEL[®]
CORPORATION


Für weitere Informationen zum QuickVue In-Line StrepA Test Kit, besuchen Sie bitte unsere Webseite, rufen Sie uns unter 001.858.552.110 an oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.

Quidel Corporation • Weltweite Firmenzentrale • 10165 McKellar Court • San Diego, CA 92121 USA • www.quidel.com


Verfahren:

1

NUR Abstrichtupfer aus Testpackung verwenden

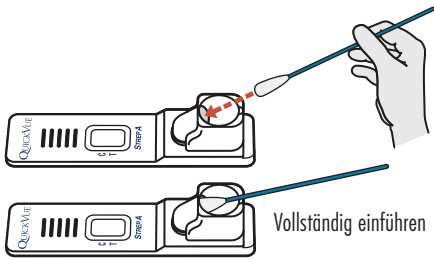

2

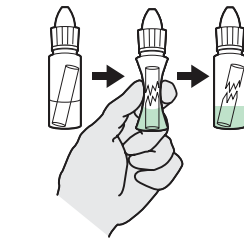


EINMAL zusammendrücken,
um Glaskapillare zu brechen

3



Schütteln

4

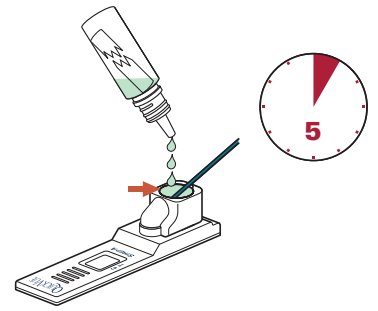

Schnell bis zum Rand füllen



Für weitere Informationen und Bestellungen kontaktieren Sie bitte unseren Vertriebspartner.

QUIDEL[®]
CORPORATION

Quidel Corporation • Weltweite Firmenzentrale • 10165 McKellar Court • San Diego, CA 92121 USA • www.quidel.com

Ihr Ansprechpartner: